

HYGIENERICHTLINIE

Reinigungs- und Desinfektionsplan

Gyn. & Geb. Sprechstunde

Gegenstand	Mittel/Art	Wann	Spezielles
Spekula	In Gigasept® AF forte 0.75% einlegen Einwirkzeit 30 Min. und danach in das Reinigungs- und Desinfektionsgerät (RDG) geben	Wird vom Untersuchenden sofort nach Gebrauch in den Treteimer eingelegt	Nach der Einwirkungszeit im Gigasept mit Wasser spülen Bei optischer Verschmutzung mechanische Reinigung mit Gigasept AF Forte 0.75 % Für sterilen Gebrauch wird das Spekulum in die Zentralsterilisation gegeben
Spekula-Wagen	Mit ProMop®-DES-AF-K 0.5% desinfizieren	Nach Gebrauch	1x pro Woche gründlich desinfizierend reinigen. 1x pro Monat Räder desinfizierend reinigen. Mit Datum versehen.
Pessare	In Gigasept® FF 6 % einlegen Einwirkzeit 15 Min. danach in das RDG geben und in die Zentralsterilisation bringen	Nach Gebrauch	Nach der Einwirkungszeit im Gigasept mit Wasser abspülen Pessare nur Patientenbezogen einsetzen
Kornzange sonstige Instrumente	Gigasept® AF forte 0.75% einlegen (in Treteimer) Einwirkzeit 30 Min. und danach in das RDG geben	Nach Gebrauch	Nach der Einwirkungszeit mit Wasser spülen Für sterilen Gebrauch in die Zentralsterilisation geben
Ultraschallkopf Bedienerfläche (Touch Screen)	Mit Cleanisept® Wipes 7.5% desinfizieren	Nach jeder Patientin	Bei der Desinfektion der Bedienerfläche (Touch Screen) sollte die Grundeinstellung eingestellt sein
Ultraschallgerät	Mit Terralin Protect 0.5 % oder Mit ProMop®-DES-AF-K 0,5% desinfizieren	Am Ende des Tages	
Monitor	Mit Cleanisept® Wipes 7.5% bei Bedarf, desinfizieren	am Ende des Tages	
<u>Vaginalsonde:</u> Ultraschallkopf	Cleanisept® Wipes FORTE (Deckel rot) Einwirkzeit 2 Min.	Nach jeder Patientin	Für die Untersuchung immer Vaginalsonde-Schutzhülle/Condom verwenden. Beachte detaillierten Aufbereitungsablauf, siehe Anhang
Kabel, Bedienerfläche (Touch Screen)	Cleanisept® Wipes 7.5%		

Erstellt von: Spitalhygiene, Leiterin Sprechstunde Gyn. & Geb.	Erstelldatum: 18.05.2011	Titel: R & D Plan Gyn & Geb. Sprechstunde	Freigabe durch: Hygienekommission	Freigabe am: 07.09.2023	Gültig ab: 07.09.2023
Gültigkeitsbereich: KSGR - Abteilung	Version: 3.0	Ablageort: Hygienerichtlinien	Revidiert durch: A. Isakovic, C. Coretti	Revision am: 02.08.2023	Seite 1/5

Vaginalsonde:

Monitor	Cleanisept® Wipes 7.5%	Tagesende und bei optischer Verschmutzung	
Gerät	Cleanisept® Wipes 7.5% oder ProMop®-DES-AF-K 0.5%		
Treteimer	Mit Terralin Protect 0.5 % oder Mit ProMop®-DES-AF-K 0.5% desinfizieren	Vor dem Erneuern des Desinfektionsmittels	Aussen und Innen
Cleanisept Dose	Mit Cleanisept® Wipes 7.5% desinfizieren	Vor dem Auffüllen	Aussen und Innen

Im Umgang mit Desinfektionsmitteln immer mit Handschuhen arbeiten.

Allgemeiner R&D Plan siehe [Pat. Pflegematerial, Techn. Geräte, Mobiliar](#)

Anhang I

Anleitung zur neuen Aufbereitungsmethode von Transvaginalen Ultraschallsonden (TVUS)

Bereich Gynäkologie

Unmittelbar nach der gynäkologischen Untersuchung mit der TVUS erfolgt die Aufbereitung durch die behandelnde Ärztin oder den behandelnden Arzt.

TVUS gelten als **semikritisches Medizinprodukt** und erfordern eine korrekte Aufbereitung.

CAVE: Es erfolgt keine Tauchbadesinfektion durch die MPA mehr. Die unmittelbare korrekte Reinigung und Desinfektion der TVUS durch die Ärztinnen und Ärzte ist daher zwingend erforderlich!



Zu verwendendes Produkt:

CLEANISEPT® WIPES forte (Roter Deckel)

Nur zur Reinigung und Desinfektion von **Vaginalsondenköpfen!**

Der Deckel der Spenderbox ist immer zu schliessen



CLEANISEPT® WIPES (Blauer Deckel)

Darf **nicht** für die Vaginalsondenköpfe verwendet werden!

Verwendung für Ultraschallgerät-Flächen, Bildschirme, Kabel etc.




1. Schritt



- Schutzhülle unmittelbar nach Untersuchung abziehen (unsterile Handschuhe verwenden)
- Mittels trockenem, fusselfreiem Tuch oder Gaze das Gel entfernen

2. Schritt

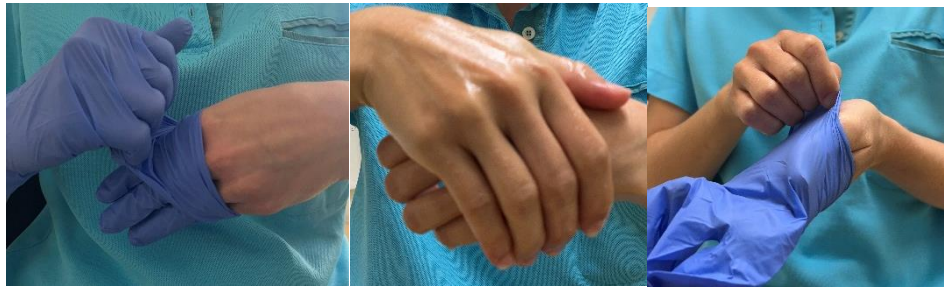


1. Handschuhe ausziehen
2. Hygienische Händedesinfektion
3. Neue unsterile Handschuhe anziehen


3. Schritt Reinigung




1. Ein Tuch aus Spenderbox CLEANISEPT® WIPES **forte** entnehmen
2. Das Tuch muss ausreichend **nass** sein
3. Vaginalsondenkopf von proximal nach distal abwischen. Auf Fugen und Kanten achten
4. Tuch entsorgen

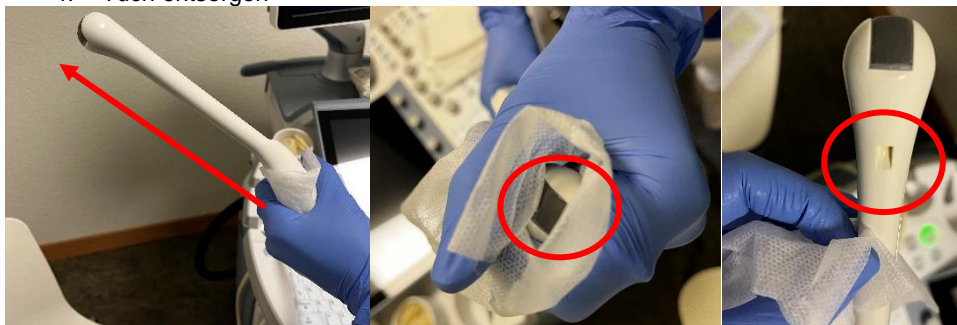

4. Schritt Desinfektion

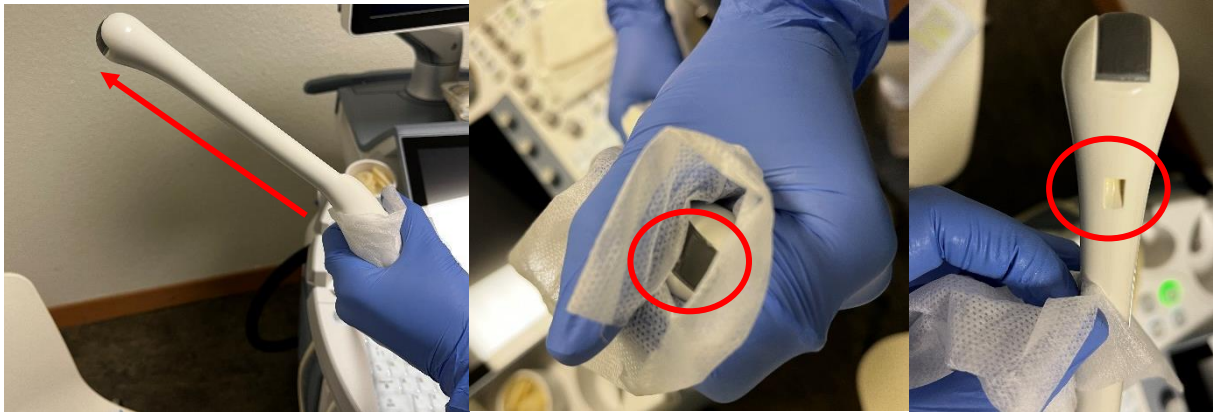

1. Frisches Tuch aus Spenderbox CLEANISEPT WIPES® **forte** entnehmen
 - Das Tuch muss ausreichend **nass** sein
2. Erneut von proximal nach distal mehrmals abwischen mit **rotierender Bewegung**
3. Besonders die **Fugen und Kanten** mit der Desinfektionslösung benetzen
4. Mit dem vorhandenen Tuch die desinfizierte Vaginalultraschallsonde in einer Hand halten um Rekontamination zu vermeiden
5. Mit zweiter Hand ein **neues Tuch** nehmen und den **Griff der Sonde** abwischen
6. Sonde in Halterung zurückhängen, Einwirkzeit **2 Minuten**

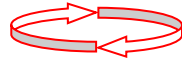

5. Schritt



1. Handschuhe ausziehen und entsorgen
2. Hygienische Händedesinfektion