

Hygienerichtlinie	
Reinigungs- und Desinfektionsplan	HNO Ambulatorium

Gegenstand	Mittel /Art	Wann	Spezielles
Instrumente	Gigasept AF forte 2% im US-Bad 15 Minuten Einwirkungszeit Gründlich mit Wasser spülen	Nach Gebrauch	Grobverschmutzung mit Bürste nachreinigen, zur Sterilisation bringen. Bei Spritzgefährdung mit Schutzbrille und Einwegkittel arbeiten
Fiberendoskop/Fiberoptik	Gigasept AF forte 2% 15 Minuten Einwirkungszeit Gründlich mit Wasser spülen	Nach jedem Gebrauch und 1x wöch. komplett einlegen (gem. Herstellerangaben)	siehe detaillierte Aufbereitungsanleitung Seite 2
Optik	Gigasept AF forte 2% 15 Minuten Einwirkungszeit Gründlich mit Wasser spülen	Nach jedem Gebrauch und 1x wöch. komplett einlegen	
Otopront: Spülschale Filter Ohrdusche	Gigasept AF forte 2% 15 Minuten Einwirkungszeit Gründlich mit Wasser spülen	1 x täglich und bei Bedarf 1 x wöchentlich	
Otopront: Sugiglas und Deckel	Thermische Desinfektion im Steckbeckenautomat	1 x täglich 2 x täglich bei häufigem Gebrauch	
Otopront: Reinigung Instrumente Fach	Terralin protect 0.5% oder ProMop®- DES –AF-K 0.5%	1 x wöchentlich	
Lasengerät (Thor)	Ethanol 70% Bichsel	Nach Gebrauch	Vor Gebrauch wird der Laserkopf mit einer Schutzhülle abgedeckt
Sprechzimmer Oberflächen Untersuchungsstuhl/Patientenliege	Terralin protect 0.5% oder ProMop®- DES –AF-K 0.5%	nach jedem Patient und bei Kontamination	
Schränke	Terralin protect 0.5% oder ProMop®-DES –AF-K 0.5%	Mind. ½ jährlich und bei Kontamination	

Wasserbehälter für Endoskope im Sprechzimmer	Je nach Verschmutzung 1-2 x täglich wechseln	Wasserbehälter werden beim wöchentlichen Wechsel der Lösung desinfiziert und gespült
---	--	---

Im Umgang mit Desinfektionsmitteln immer mit Handschuhen arbeiten.

Allgemeiner R&D Plan siehe [Pat. Pflegematerial, Techn. Geräte, Mobiliar](#)

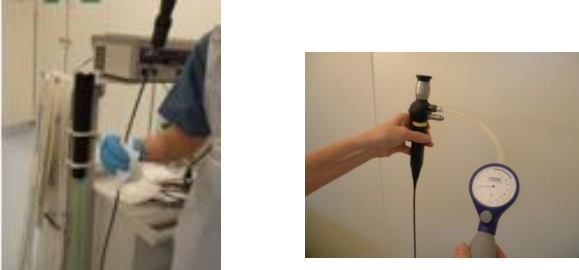



Erstellt von: HNO Ambulatorium, Spitalhygiene	Erstelldatum: 05.12.2002	Titel: R&D Plan HNO Ambulatorium	Freigabe durch: Hygienekommission	Freigabe am: 06.09.2019	Gültig ab: 06.09.2019	HR
Gültigkeitsbereich: KSGR	Version: 5.0	Ablageort: Hygienerichtlinien	Revision durch: U. Gadola, E. Burtcher, B. Spescha	Revision am: 19.08.2019	Seite(n): 1/2	

Aufbereitungsanleitung flexible Endoskope ohne Kanal und starre Fiberoptiken

Material

- Schutzkleidung: -unsterile Handschuhe, Mund-Nasenschutz, unsteriler Schutzkittel (Einweg), Schutzbrille
- Dichtigkeitsmessgerät (für flexible Endoskope)
- Steigrohr für die Desinfektion und Aufbewahrung
- Wanne für die Desinfektion
- Reinigungs- und Desinfektionsmittel: Gigasept AF forte 2%

Vorgehen

1. Vorreinigung und Dichtigkeitsprüfung nach dem Untersuch	
	<p>Direkt nach Untersuch Grobverschmutzung mit Einwegtuch entfernen.</p> <p>Dichtigkeitstest wird durchgeführt (für flexible Endoskope).</p>
2. Desinfektion	
<p>a.) </p> <p>b.) </p>	<p>a.) Nach jedem Untersuch: Endoskop während 15 min. im Gigasept AF forte 2% in Steigrohr einlegen</p> <p>b.) 1x wöchentlich (gem. Herstellerangabe): Instrument vollständig, während 15 Min. in Gigasept AF forte 2% einlegen. Anschließend gründlich mit Leitungswasser spülen.</p>
3. Spülung, Trocknung und Aufbewahrung	
	<p>Flexibles Endoskop ohne Kanal: Nach Einwirkzeit/Desinfektion das Instrument gründlich unter fließendem Wasser spülen und mit sauberem Einwegtuch (nur für Endoskope) trocknen.</p> <p>Starre Fiberoptiken: Nach Einwirkzeit/Desinfektion das Instrument im Wasserbehälter reinigen/spülen und mit sauberem Einwegtuch (nur für Endoskope) trocknen.</p> <p>Die Aufbewahrung der flexiblen Endoskope (ohne Kanal) und starren Fiberoptiken erfolgt hängend in der Schutzhülse.</p>
4. Aufbereitung der Schutzhülse und Desinfektionswanne	
<p>Steigrohr und Desinfektionswanne</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wechsel der Gigasept AF forte 2%-Lösung nach 7 Tagen Standzeit bzw. bei sichtbarer Verschmutzung • Steigrohr leeren, gut ausspülen, aussen desinfizierend abwischen mit ProMop®-DES –AF-K 0.5% • Neue Gigasept AF forte 2%-Lösung ansetzen und Steigrohr befüllen. Anschreiben: Mittel und Konzentration, Ansetz- und Verfalldatum <p>Aufbewahrungshülse 1x wöchentlich aufbereiten: Steigrohr mit in Gigasept AF forte 2% ausspülen, aussen desinfizierend abwischen und trocknen lassen</p>	