

## HYGIENERICHTLINIE

# Wandspender, Halterungen, Dosierpumpen für Seifen-/ Händedesinfektionsmittel

19.07.2023

Erstellt von	Spitalhygiene
Erstelldatum	13.11.2019
Gültigkeitsbereich	KSGR
Titel	Spender, Halterungen, Dosierpumpe für Seifen-/ Händedesinfek- tionsmittel
Version	2.1
Ablageort	Hygienerichtlinien
Revision durch	U. Gadola, A. Isakovic
Revision am	14.07.2023
Freigabe durch	Hygienekommission
Freigabe am	24.09.2021
Gültig ab	24.09.2021

# Inhaltsverzeichnis

<b>1. Aufbereitung</b>	<b>3</b>
<b>2. Verfalldatumskontrolle / Entsorgung</b>	<b>3</b>
<b>3. Diverse Wandspender, Halterungen und Dosierpumpen</b>	<b>3</b>
3.1 Wandspender für Seifen- und Händedesinfektionsmittel	
3.2 Halterungen für Händedesinfektionsmittel 500ml	
3.3 Kittelclip für Händedesinfektionsmittel 100ml	

## 1. Aufbereitung


Die Halterungen inklusive Tropfschalen werden täglich desinfizierend gereinigt. Zuständigkeit: Reinigungsfirma.  
Ausnahme: Für "IVF Hartmann Eurospender 3flex" ist der jeweilige Bereich zuständig.  
Bei Patientenaustritt wird die Betthalterung (ausser IPS/IMC/Dialyse, WST) auf den Nachttisch gestellt. Die Reinigungsfirma ist für die Schlussdesinfektion zuständig.

## 2. Verfalldatumskontrolle / Entsorgung

Die Reinigungsfirma kontrolliert das Verfalldatum. Das Anbruchdatum muss nicht notiert werden. Die Einweg-Dosierpumpe wird mitsamt der aufgebrauchten Desinfektionsmittelflasche, gemäss Entsorgungskonzept KSGR, in den Sack mit den leeren Infusionsbeuteln entsorgt. Gebinde aus dem Isolationszimmer werden desinfizierend abgewischt und nicht entsorgt.

## 3. Diverse Wandspender, Halterungen und Dosierpumpen

### 3.1 Wandspender für Seifen- und Händedesinfektionsmittel

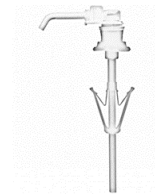

Einweg Dosierpumpe  
SAP #10111911

### 3.2 Halterungen für Händedesinfektionsmittel 500ml

für Medienstange  
(nur Fontana)

für Patientenbetten

für Patientenbetten IPS/IMC/  
Dialyse, Verbandswagen



Eurospender 3 flex



Einweg Dosierpumpe  
SAP #10001305

### 3.3 Kittelclip für Händedesinfektionsmittel 100ml

(erhältlich in der Personalgarderobe)



Für die Aufbereitung der Kittelclip sind die Mitarbeitenden selbst verantwortlich.  
Tägliche Wischdesinfektion mit einem Flächendesinfektionsmittel wie z.B.  
Terralin protect 0.5%