

Reinigungs- und Desinfektionsplan
Zentrallabor / Labor WST

Andrologie			
Gegenstand	Mittel/Art	Wann	Spezielles, Verantwortlichkeit
Arbeitsplatz/Flächen	Terralin protect 2 % abwischen	1 x täglich und sofort bei optischer Verschmutzung	
Sofa	Terralin protect 2 % abwischen	Nach jedem Patienten	
Wärmeschrank innen und aussen	Terralin protect 2 % abwischen	1x pro Monat: siehe Wartungsprotokoll und sofort bei optischer Verschmutzung	Nach Desinfektion kurz lüften
Zentrifugen innen und aussen	Terralin protect 2 %, abwischen	1. Freitag im Monat: siehe Wartungsprotokoll GV Zentrifugen	
Zentrifugeneinsätze, Becher (innen und aussen), Deckel	In Handabwaschmittel MayaEasy einlegen. Bei sichtbaren Verschmutzungen mit Wattetupfer und Terralin protect 2 % reinigen		Kontaminierte Becher / Deckel / Einsätze -mit Terralin protect 2 % reinigen

Corelabor / Labor WST			
Gegenstand	Mittel/Art	Wann	Spezielles, Verantwortlichkeit
Zentrifugen innen und aussen	Terralin protect 2 %, abwischen	1. Freitag im Monat: siehe Wartungsprotokoll GV Zentrifugen	
Zentrifugeneinsätze, Becher (innen und aussen), Deckel	In Handabwaschmittel MayaEasy einlegen. Bei sichtbaren Verschmutzungen mit Wattetupfer und Terralin protect 2 % reinigen		Kontaminierte Becher / Deckel / Einsätze autoklavieren: Autoklav Systec VX-150, Programm 1 (20 min, 121 °C)
Arbeitsplatz/Flächen	Terralin protect 2 % abwischen	1 x täglich oder sofort bei optischer Verschmutzung	
Gestelle/Ablagen/Geräteoberflächen	Terralin protect 2 % abwischen	1 x pro Woche (freitags)	
PC-Tastatur, -Maus, Cordless-Telefon	Cleanisept Wipes 7.5 % abwischen	1 x pro Woche (freitags): siehe Wartungsplan der einzelnen Geräte	PC ist heruntergefahren oder ist gesperrt
Kühlschränke	Handabwaschmittel oder mit Allzweckreiniger abwischen	Halbjährlich siehe Wartungs-/Reinigungsplan	Abtauen, entrümpeln und reinigen
Tiefkühler -30°C	Handabwaschmittel oder Allzweckreiniger, abwischen		Ob und wann ein Gerät abgetaut wird, entscheidet die FL und delegiert die Wartungsaufgabe (ggf. Evakuierung) des Inhalts an die MA.
Proben-Racks Firma Sysmex/Stago Firma Roche	Handabwaschmittel MayaEasy	1x pro Monat gemäss Wartungsprotokoll	Nur saubere Vacutainer einsetzen. Bei optischer Verschmutzung sofort mit Terralin protect 2 % abwischen
Blutentnahmeraum B5 18: Blutentnahmestuhl mit Armlehne,	Terralin protect 2 %, abwischen	Nach jedem Gebrauch Armlehne durch BMA	
Hocker fahrbar, Abfalleimer	Terralin protect 2 %, abwischen	Bei optischer Verschmutzung sofort durch BMA	
Materialkorpus	Terralin protect 2 %, abwischen	Nach jedem Gebrauch Ablagefläche durch BMA, ½ jährlich gründlich inkl. Schubladen durch BMA: siehe Wartungs/Reinigungsplan	Bei optischer Verschmutzung sofort

Erstellt von: C. Guler, U. Gadola	Erstelldatum: 27.09.2011	Thema: R&D Plan Zentrallabor	Freigabe durch: Hygienekommission	Freigabe am: 18.11.2022	Gültig ab: 18.11.2022	HR
Gültigkeitsbereich: KSGR	Version: 4.0	Ablageort: Hygienerichtlinien	Revision durch: C. Guler / M. Risch	Revision am: 26.10.2022	Seite(n): 1/3	

Mikrobiologie			
Gegenstand	Mittel/Art	Wann	Spezielles, Verantwortlichkeit
Diverse Röhrchenständer	Thermische Desinfektion im RDG (Reinigungs- und Desinfektionsgerät)	Min. 1x pro Monat: siehe Wartungs-/Reinigungsplan	Bei optischer Verschmutzung sofort mit Terralin protect 2 % abwischen
Zentrifugen innen und aussen Zentrifugeneinsätze, Becher (innen und aussen), Deckel	Terralin protect 2 %, abwischen	1. Woche im Monat (s. Wartungs-/Reinigungsplan Mikrobiologie)	Kontaminierte Becher / Deckel / Einsätze autoklavieren: Autoklav Systec VX-150, Programm 1 (20 min, 121 °C)
Arbeitsplatz/Flächen	Terralin protect 2 % abwischen	1 x täglich und sofort bei optischer Verschmutzung	
Gestelle/Ablagen/ Geräteoberflächen	Terralin protect 2 % abwischen	1 x pro Woche (freitags)	
PC-Tastatur, -Maus, Cordless-Telefon	Cleanisept Wipes 7.5 % abwischen	1x pro Woche (freitags) oder gemäss Wartungsplan der einzelnen Geräte	PC ist heruntergefahren oder ist gesperrt
Kühlschränke	Handabwaschmittel oder mit Allzweckreiniger abwischen	Halbjährlich: siehe Wartungs-/Reinigungsplan	Abtauen, entrümpeln und reinigen
Wärmeschränke innen und aussen	Terralin protect 2 % abwischen	1. und 3. Woche des Monats oder sofort bei optischer Verschmutzung: siehe Wartungs-/Reinigungsplan	Nach Desinfektion kurz lüften
CO2-Wärmeschrank Tablare	Terralin protect 2 % abwischen	2. und 4. Woche des Monats oder sofort bei optischer Verschmutzung: siehe Wartungs-/Reinigungsplan	
Tiefkühler -30°C	Handabwaschmittel oder Allzweckreiniger, abwischen		Ob und wann ein Gerät abgetaut wird, entscheidet die FL und delegiert die Wartungsaufgabe (ggf. Evakuierung) des Inhalts an die MA.
Tiefkühler -80° C		1 x jährlich oder bei Bedarf bei starker Vereisung siehe Wartungs-/Reinigungsplan	Siehe GV Tiefkühlschränke
Überstand von Tbc- Verarbeitung	Gigasept AF forte 2 %, Überstandsflasche füllen, 20 Min. unter UV-Lampe, danach über Nacht stehen lassen.	Nach Gebrauch	Anschliessend autoklavieren: Autoklav Systec VX-150, Programm 6 (20 min, 121 °C). Danach in Ausgusslavabo entsorgen
Proben-Carrier Vitek	Thermische Desinfektion im RDG (Reinigungs- und Desinfektionsgerät)	1 x pro Monat: gemäss Wartungsprotokoll	

Grundsätzliches:

- Bei Umgang mit Flächen-Desinfektionsmittel immer Handschuhe tragen.
- Verunreinigung durch Körperflüssigkeiten, bebrütete Kulturen usw. sofort mit Terralin protect 2 % abwischen.
- Wischdesinfektion: Alle Desinfektionsmittel einwirken lassen, nicht nachtrocknen.

Allgemeiner R&D Plan siehe [Pat. Pflegematerial, Techn. Geräte, Mobiliar](#)

Erstellt von: C. Guler, U. Gadola	Erstelldatum: 27.09.2011	Thema: R&D Plan Zentrallabor	Freigabe durch: Hygienekommission	Freigabe am: 18.11.2022	Gültig ab: 18.11.2022	HR
Gültigkeitsbereich: KSGR	Version: 4.0	Ablageort: Hygienerichtlinien	Revision durch: C. Guler / M. Risch	Revision am: 26.10.2022	Seite(n): 2/3	


Anleitung Vorbereitung der X-Wipes Safety Pack




1. Einweg Handschuhe anziehen



2. Deckel abnehmen

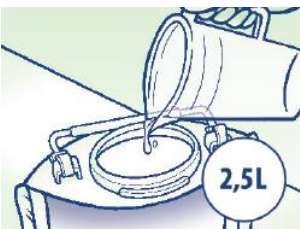

3. Einfüllen von 2.5 Liter Terralin® protect 2%

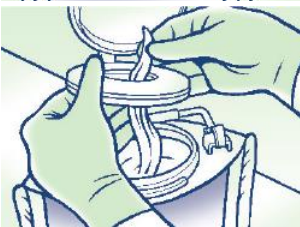

4. Tuch durch die Öffnung ziehen



5. Deckel aufschrauben



6. Etikette Anschreiben mit Name, Auffüll- und Ablaufdatum

Standzeit

Die befüllten X-Wipes Safety Packs sind ab dem Befülldatum für 28 Tage haltbar.

Entsorgung

Die X-Wipes Safety Packs können in den normalen Abfall entsorgt werden. Restdesinfektionsmittel muss vorher in den Ausguss ausgeleert werden.

Erstellt von: C. Guler, U. Gadola	Erstelldatum: 27.09.2011	Thema: R&D Plan Zentrallabor	Freigabe durch: Hygienekommission	Freigabe am: 18.11.2022	Gültig ab: 18.11.2022	HR
Gültigkeitsbereich: KSGR	Version: 4.0	Ablageort: Hygienerichtlinien	Revision durch: C. Guler / M. Risch	Revision am: 26.10.2022	Seite(n): 3/3	